


**Brosses plates pour nettoyage d'instruments de Batrik** sont spécifiquement conçus pour une utilisation hospitalière lors de la préparation et du pré-nettoyage des instruments.

- Manche long et ergonomique facile à utiliser
- Tête de brosses extra longue (60 ± 5 mm pour les jetables et 75 ± 5 mm pour les réutilisables)
- Les fibres de la brosses sont transparentes, permettant une vérification rapide de sa propreté
- La composition du plastique utilisée pour fabriquer le manche ne libère aucun composant toxique

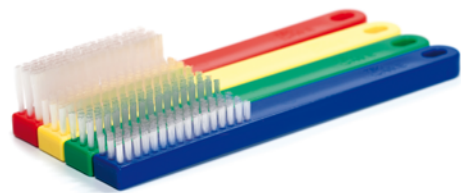

Batrik fabrique quatre types de brosses plates:

- **EXTRA RIGIDE** Les fibres en polyamide sécuritaire pour les instruments offrent une rigidité similaire à l'acier afin de permettre un nettoyage en profondeur, particulièrement sur les surfaces inégales.
- **RIGIDE** la rigidité de cette brosses, ainsi que la longueur des poils et du manche, améliore et simplifie le nettoyage d'instruments.

- **FLEXIBLE** Cette brosses est conçue pour de larges instruments demandant un nettoyage plus léger, tel que les instruments optiques, en plastiques ou les endroits difficiles d'accès demandant des poils plus flexibles pour nettoyer.

- **EXTRA FLEXIBLE** Les très longs poils éliminent le stress durant le nettoyage et rend cette brosses idéale pour les instruments fragiles et les endoscopes. La longueur des poils aide à nettoyer les endroits difficiles d'accès avec les poils plus courts, tel que la pointe déviante des endoscopes flexibles.



#### Brosse plate autoclavable / Réutilisable Extra rigide

# Item	Description	Longueur - mm	Grandeur de brosse - mm
50-40917	Brosse plate réutilisable (extra rigide)	220mm	75 Lo x 20 La x 10 H

**Emballage:** Sac de 3



#### Brosse plate autoclavable / Réutilisable Rigide

# Item	Description	Longueur - mm	Grandeur de brosse - mm
50-40918	Brosse plate réutilisable (rigide)	220mm	75 Lo x 20 La x 15 H

**Emballage:** Sac de 3



#### Brosse plate autoclavable / Réutilisable Flexible

# Item	Description	Longueur - mm	Grandeur de brosse - mm
50-40919	Brosse plate réutilisable (flexible)	220mm	75 Lo x 20 La x 15 H

**Emballage:** Sac de 3



#### Brosse plate autoclavable / Réutilisable Extra flexible

# Item	Description	Longueur - mm	Grandeur de brosse - mm
50-40920	Brosse plate réutilisable (extra flexible)	220mm	75 Lo x 20 La x 25 H

**Emballage:** Sac de 3



#### Brosses plates jetables / Rigide et Flexible

# Item	Description	Longueur - mm	Grandeur de brosse - mm
50-40921	Brosse plate jetable (rigide)	220mm	60 Lo x 20 La x 15 H
50-40922	Brosse plate jetable (flexible)	220mm	60 Lo x 20 La x 15 H

**Emballage:** Sac de 20



#### POLYAMIDE FIBERS

