


BATRIK BROSSES DE CANAL DAYBRUSH^{MC} RÉUTILISABLES

Nos brosses de canal DayBrush^{MC} réutilisables peuvent être utilisées pour nettoyer les endoscopes pendant une journée entière. En fait, il a été prouvé qu'elles permettent de nettoyer efficacement jusqu'à 10 endoscopes avant de devoir les mettre au rebut*.

- L'embout souple assure une manipulation facile dans le canal sans risque de dommage
- L'extrémité arrière est scellée et adoucie pour éviter que le fluide ne soit emprisonné dans le tube. Le processus d'adoucissement permet également d'éviter les dommages si la brosse de nettoyage est utilisée à l'envers.
- Peuvent être stérilisées à la vapeur.
- Le volume des poils est de 20 mm de long, soit près du double de la plupart des brosses du marché. Une grande brosse permet un meilleur contact avec la surface pendant le processus de nettoyage.
- Économies importantes par utilisation par rapport aux autres brosses de nettoyage de canal réutilisables ou jetables.

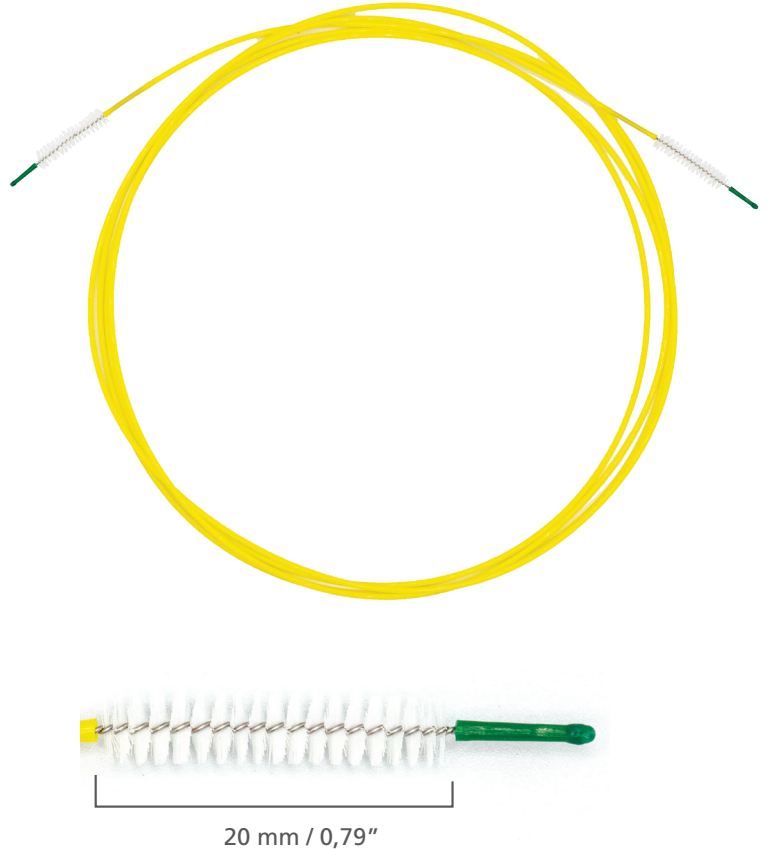

(*) À jeter après le nettoyage de 10 endoscopes ou plus tôt si une dégradation de la brosse est constatée. Après dix applications, la brosse peut avoir l'apparence de pouvoir continuer à nettoyer efficacement, mais nous déconseillons une utilisation prolongée en raison du risque de contamination croisée. Le nombre réel d'utilisations variera en fonction de la manipulation et du traitement

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINE (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
30-18050-T	70" / 180 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,07" / 1,75 mm	Simple
30-23050-T	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,07" / 1,75 mm	Simple
30-23050-2T	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,07" / 1,75 mm	Double

EMBALLAGE : 50 / boîte

LES COMPLÉMENTS FACULTATIFS DU KIT

AJOUTER LE SUFFIXE :

« F » pour recevoir un ensemble avec notre éponge plate. Applicable sur certains modèles seulement, appelez-nous pour plus de détails. (Boîte de 40)

« K » pour recevoir un ensemble avec la brosse de nettoyage à usage unique pour valve/contrôle 5/11 à double extrémité (article n° 27-57787). Applicable sur tous les modèles. (Boîte de 50)

« FK » pour recevoir à la fois l'éponge et les brosses de nettoyage de la valve. (Boîte de 40)

WWW.BATRIK.COM