

nutriline®

TWINFLO

Cathéter à double lumière 2 Fr avec aiguille pelable Le

Nutriline® TwinFlo a été spécialement conçu pour les bébés nécessitant des perfusions multiples. Sa conception à double lumière permet une meilleure gestion des fluides et évite le mélange de médicaments incompatibles.

Ligne avec stylet irrigable

- Pour vérifier la perméabilité de la ligne
- Permet de confirmer le flux et facilite l'avancement du cathéter

Petite pince de clampage

- Petite pince pour la gestion de la ligne

Ligne d'extension

- Extension intégrée avec ailettes de stabilisation pour une meilleure fixation du cathéter

Double lumière jusqu'à l'extrémité

- Évite le mélange de médicaments incompatibles

Embouts codés par couleur


- Pour une identification facile et une utilisation sécuritaire

Matériau PUR

- Le matériau PUR devient plus souple à température corporelle, réduisant les traumatismes vasculaires et améliorant le temps de mise en place

Radio-opaque aux rayons X

- Permet un positionnement précis sans produit de contraste supplémentaire

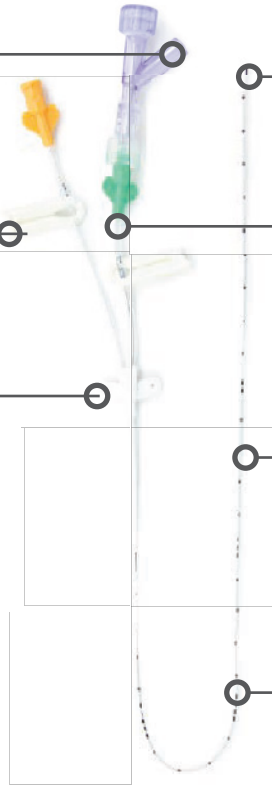

Code produit	Cathéter			Introduceur		Stylet	Unités/Boîte
	Longueur	Volume d'amorçage	Débit (pression 1 bar)	Type	Taille		
1252.232G	30 cm	2 x 0,2 ml	2 x 1,45 ml / min	Sans introduceur		Non	10
1252.232M	30 cm	2 x 0,2 ml	2 x 1,45 ml / min	Microflash	20 G	Non	10
1252.230G	30 cm	2 x 0,2 ml	2 x 1,45 ml / min	Microflash	20 G	Oui	10

Trousses et accessoires

Code produit	Description	Unités/Boîte
7371.19	Introduceur Microflash 20 G	10
1261.20N	Aiguille fendue 24 G	20
AMS-850TC	Outil de coupe de cathéter V-Cutter	20



Microflash



Aiguille fendue



V-Cutter