



pfmmedical

Fiers de servir
les professionnels de la
**Santé
Canadiens**
et leurs patients

avec un système de
drainage complet
et universel, offrant
une solution clé en
main standardisée,
conviviale et
économique.

ASEPT[®]

Kits d'insertion

Système de drainage
pleural et péritonéal

ET-VA[®]

Bouteilles de drainage



SURGMED

GROUP ● ● ●

Le groupe Surgmed est un distributeur et fabricant canadien de dispositifs médicaux qui dessert fièrement le marché de la santé depuis 1992 par l'entremise de sa division Surgi-Pharm Avancée.

Ayant plusieurs décennies d'expérience et d'une présence reconnue à l'échelle nationale dans le drainage IPC (cathéters intrapleuraux et péritonéaux), Surgmed collabore avec des fournisseurs technologiques mondiaux de premier plan afin d'offrir des solutions avancées et cliniquement éprouvées aux hôpitaux, cliniques et équipes spécialisées.

Notre équipe de ventes expérimentée, composée de représentants dédiés dans chaque province d'un océan à l'autre, offre un soutien rapide pour : la sélection des produits, la formation clinique, le soutien technique continu.

Grâce à notre solide partenariat avec pfm et à notre expertise pratique en IPC, nous veillons à ce que les professionnels de la santé disposent des outils nécessaires pour améliorer les soins ambulatoires, le confort des patients et leur qualité de vie.

Surgmed s'engage à offrir des solutions de drainage innovantes qui soutiennent les cliniciens et améliorent les résultats pour les patients partout au Canada.



Pourquoi pfm?

pfmmedical est une entreprise de dispositifs médicaux de premier plan spécialisée dans les systèmes de drainage interventionnels pleuraux et péritonéaux.

Reconnue pour son innovation et ses technologies cliniquement éprouvées, pfmmedical développe des solutions avancées permettant aux cliniciens de gérer de façon sécuritaire et efficace l'accumulation de liquides liée à des conditions telles que : les épanchements pleuraux récurrents et l'ascite maligne.

Axés sur l'amélioration des résultats cliniques et de la qualité de vie des patients, les produits pfmmedical sont utilisés par des professionnels de la santé à travers le monde et constituent un élément clé du portefeuille de solutions de drainage de Surgmed au Canada.

Cathéter ASEPT® et trousse d'insertion

Les systèmes de drainage pleural et péritonéal ASEPT® sont conçus pour un drainage intermittent à long terme des accumulations de liquides symptomatiques récurrentes.



- | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Cathéter ASEPT® | 6 Aiguille 16G x 1,0" (25,4 mm) | 11 Coussin de cathéter en mousse | 16 Seringue 10 mL |
| 2 Ligne de drainage ASEPT® | 7 Aiguille 25G x 1,0" (25,4 mm) | 12 Aiguille introductrice | 17 Guide métallique à extrémité en J |
| 3 Adaptateur de ligne de drainage 5-en-1 | 8 Aiguille 22G x 1,5" (38,1 mm) | 13 Introducteur pelable | 18 Tunnéliseur |
| 4 Chloraprep® 10,5 mL (ampoule) | 9 Pansement adhésif Tegaderm® | 14 Dilatateur 8F (2,67 mm) | 19 Pince |
| 5 Suture Synthétique 2-0 Droite et Suture Synthétique 3-0 Courbée | 10 Compresse de gaze 4" x 4" | 15 Dilatateur 12F (4,0 mm) | 20 Scalpel de sécurité |
| | | | 21 Champ fenestré |

Le composant principal du système de drainage ASEPT® est le cathéter, muni d'une valve aseptique auto-obturante assurant une connexion sécuritaire et fiable.

Cette valve peut être connectée à une bouteille de drainage sous vide ASEPT®, à un sac de drainage ou à une ligne de drainage autonome pour connexion à d'autres équipements de collecte de liquides.

Caractéristiques

- ▶ Connexion sécurisée
- ▶ Conception aseptique sans capuchon
- ▶ Sans aiguille et désinfectable
- ▶ Facile à remplacer
- ▶ Auto-obturante

Portefeuille de cathéters ASEPT®

Solution de drainage intermittent à long terme

Le système de cathéter ASEPT® de pfm est conçu pour offrir un drainage contrôlé, intermittent et à long terme chez les patients présentant : des épanchements pleuraux et une ascite maligne.

Voici quelques caractéristiques clés du cathéter pfm 15Fr :

- Conçu pour un drainage intermittent à long terme des épanchements pleuraux (M7001-CAN) et de l'ascite maligne (M7008-CAN).
- Valve aseptique, sans aiguille et désinfectable, assurant une connexion du cathéter sécuritaire et hygiénique.
- Conçu avec précision pour permettre un accès périodique à la cavité pleurale ou péritonéale afin de soulager les symptômes.
- Inclus dans une trousse contenant la plupart des éléments nécessaires à l'implantation du cathéter, simplifiant la procédure.
- Compatible avec différentes lignes de drainage, bouteilles ou sacs pour une utilisation flexible en milieu clinique ou ambulatoire.

Plateforme unique pour usage pleural et péritonéal

Conçue pour une efficacité procédurale et une gestion flexible des patients.

● Cathéter en silicone 15Fr

Souple, confortable et fiable pour un usage à long terme.

● M7001-CAN - 66 cm

Conçu pour les épanchements pleuraux

● M7008-CAN - 71 cm

Conçu pour l'ascite maligne



● Valve aseptique sans aiguille

Maintient une connexion sécuritaire et hygiénique et réduit le risque d'infection.

● Conçu pour drainage intermittent

Permet un accès périodique pour le soulagement des symptômes.

● Trousse complète d'implantation

Inclut la majorité des composantes nécessaires à une mise en place efficace.

Parcours ASEPT®

Approche intégrée pour un drainage intermittent à long terme

1 Consultation du patient et mise en place du cathéter

Les patients sont évalués par leur chirurgien pour l'insertion d'un cathéter ASEPT®, soit pleural (M7001-CAN) ou péritonéal (M7008-CAN).

Les patients porteurs d'un cathéter IPC nécessitent un drainage continu selon les directives de leur professionnel de la santé.



2 Remplacement de la valve universelle pfm



De nombreux patients ont des cathéters IPC munis de valves spécifiques à une marque, compatibles uniquement avec certains types de bouteilles, ce qui complique les situations urgentes.

pfm propose une valve universelle Luer-Lok pouvant être remplacée au chevet du patient, permettant une compatibilité avec toute connexion Luer-Lok (y compris l'aspiration murale) et surtout l'utilisation des bouteilles de drainage pfm pour un soulagement immédiat.

3 Drainage clinique – Jet-Vac

Après l'insertion, les patients peuvent nécessiter un drainage périodique en clinique.

Les bouteilles sous vide Jet-Vac de pfm sont disponibles en formats : 600 ml, 1000 ml, 1500 ml.

Différentes options sont offertes : lignes de drainage intégrées, configurations avec valve seulement et ports d'échantillonnage pour les patients nécessitant des analyses supplémentaires.



4 Soins à domicile des patients ASEPT®

Pour les patients effectuant leur drainage à domicile, pfm offre des troussees prêtes à l'emploi, conviviales et adaptées aux patients.

Ces troussees comprennent : des bouteilles à usage personnel, tout le matériel de pansement nécessaire, et un étui de transport pratique.



Cette solution est idéale tant pour les patients que pour les équipes de soins à domicile lors des visites.



Bouteilles de drainage

Description


- ▶ Disponibles en trois formats :
 - ▶ 600 ml
 - ▶ 1,000 ml
 - ▶ 1,500 ml
- ▶ Disponibles en deux configurations :
 - ▶ Ligne de drainage avec port d'échantillonnage (permet un accès facile au contenu de la bouteille à l'aide d'une seringue Luer-Lok)
 - Connexion au niveau du cathéter
 - La ligne de drainage ne peut pas être retirée ni remplacée
 - ▶ Valve Luer-Lok
 - Connexion au niveau de la bouteille
 - Les prélèvements peuvent être effectués à l'aide d'une seringue Luer-Lok directement sur la valve
 - Stérilité interne maintenue



Description

- ▶ Disponibles en deux formats :
 - ▶ 600 ml
 - ▶ 1,000 ml
- ▶ Disponible uniquement avec ligne de drainage permettant de réguler le débit en cas d'inconfort du patient pendant la procédure de drainage.

Différences entre les systèmes de drainage ASEPT® et Jet-Vac

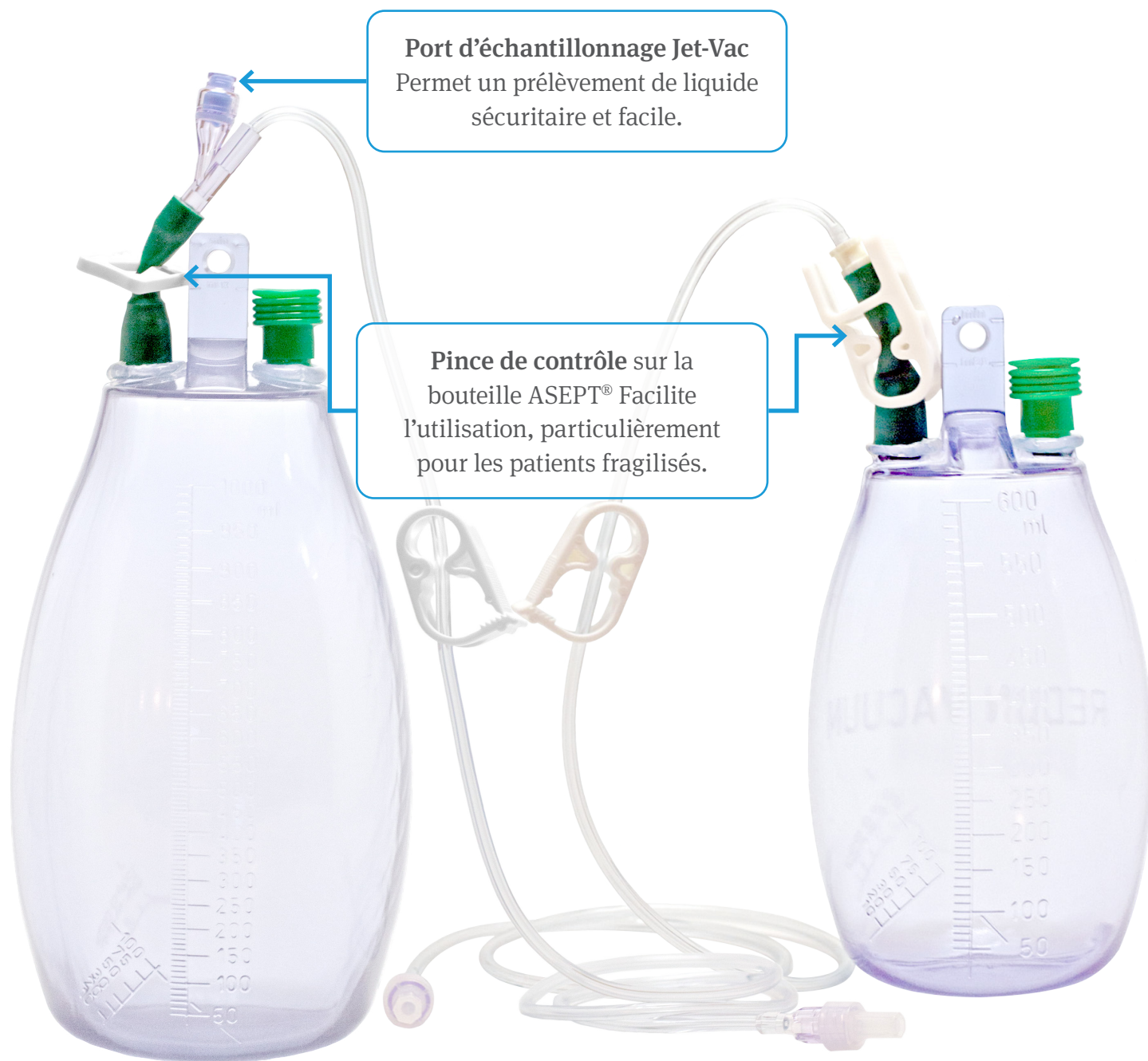



Les cathéters de centèse Jet-Vac, les plateaux de procédure Jet-Vac et les flacons Jet-Vac offrent un système de drainage complet pour les médecins, les infirmiers(ères) et les hôpitaux. Le flacon de drainage Jet-Vac est un dispositif sous vide jetable utilisé pour aspirer, évacuer ou prélever des fluides corporels.

Cathéters de centèse Jet-Vac

Grands orifices latéraux circulaires conçus pour augmenter le drainage des fluides Pointe de cathéter effilée

- Assure une transition en douceur
- Aide à minimiser l'inconfort du patient

Matériau en HDPE

- Réduit l'écrasement du cathéter
- Favorise une insertion fluide du cathéter

Embase d'aiguille transparente avec verrouillage du cathéter

- Améliore la visibilité des fluides
- Conception ergonomique pour une prise en main sécurisée
- Préviend la séparation entre l'aiguille et le cathéter

Bouchon de ventilation en plastique

- Permet à l'air de s'échapper
- Offre une sécurité accrue au médecin

Aiguille échogène

- Assure la visibilité de l'aiguille lors du positionnement sous échographie



Informations de commande

Cathéters de centèse Jet-Vac

Réf. Article	Taille du cathéter	Longueur	Calibre de l'aiguille	Qté par boîte
M7511	4F	7 cm	20G	5/Boîte
M7512	4F	10 cm	20G	5/Boîte
M7513	5F	7 cm	19G	5/Boîte
M7514	5F	10 cm	19G	5/Boîte
M7515	5F	15 cm	19G	5/Boîte

Accessoires ASEPT®

pfm medical, inc. est fière d’offrir une gamme complète d’accessoires afin de garantir que le médecin ou le patient dispose de tout le nécessaire pour effectuer la procédure de drainage. Notre portefeuille d’accessoires comprend les éléments suivants :

Valve de remplacement ASEPT®



Ensemble de ligne de drainage ASEPT®



Trousse de procédure ASEPT®



Cathéter de drainage permanent ASEPT®



Connexion universelle à la bouteille de drainage



Informations de commande

Bouteilles et sacs de drainage ASEPT® – Soins à domicile

No D'Article	Description	Qté par boîte
M7002	ASEPT® Kit drainage 600 ml – Bouteille sous vide + ensemble procédure	10 unités
M7000	ASEPT® Kit drainage 1000 ml – Bouteille sous vide + ensemble procédure	10 unités
M7006	ASEPT® Kit drainage Select 600 ml – Bouteille faible vide + ensemble procédure	10 unités
M7007	ASEPT® Kit drainage Select 1000 ml – Bouteille faible vide + ensemble procédure	10 unités
M7060	ASEPT® Kit démarrage drainage 2000 ml – Sac gravité + tubulure (péritonéal seulement)	10 unités
M7058	ASEPT® Sac drainage 2000 ml – Sac gravité + tubulure (péritonéal seulement)	10 unités
M7080	ASEPT® Kit démarrage drainage 600 ml – Bouteille sous vide + ensemble procédure (boîte patient)	5 unités
M7070	ASEPT® Bouteille 1000 ml – Bouteille sous vide seulement	10 unités
M7072	ASEPT® Bouteille 600 ml – Bouteille sous vide seulement	10 unités
M7081	ASEPT® Kit démarrage drainage 1000 ml – Bouteille sous vide + ensemble procédure (boîte patient)	5 unités

Informations de commande

ASEPT® Kits d'insertion

No D'Article	Description	Qté par boîte
M7001-CAN	ASEPT® Système de drainage pleural (comprend le cathéter ASEPT® et le kit d'insertion)	1 unité
M7008-CAN	ASEPT® Système de drainage péritonéal (comprend le cathéter ASEPT® et le kit d'insertion)	1 unité
M7009	ASEPT® Kit d'insertion supplémentaire (comprend des dilateurs 7F et des introducteurs pelables valvulés 16F)	10 unités

Bouteilles Jet-Vac – Usage clinique

No D'Article	Description	Qté par boîte
M7090	Bouteille de drainage sous vide 1 000 ml – configuration valve seulement	10/caisse
M7092	Bouteille de drainage sous vide 600 ml – configuration valve seulement	10/caisse
M7093	Bouteille de drainage sous vide 1 500 ml – configuration valve seulement	10/caisse
M7094	Bouteille de drainage sous vide 1 000 ml avec tubulure de drainage	10/caisse
M7095	Bouteille de drainage sous vide 1 500 ml avec tubulure de drainage	10/caisse
M7096	Bouteille de drainage sous vide 600 ml avec tubulure de drainage	10/caisse

Accessoires


No D'Article	Description	Qté par boîte
M7004	Valve de remplacement du cathéter	5/boîte
M7005	Ensemble de tubulure de drainage (comprend une tubulure de drainage avec capuchons d'extrémité et un adaptateur 5-en-1)	10/caisse
M7040	Pack de procédure (changement de pansement traditionnel)	10/caisse
M7097	Extension de tubulure de drainage Jet-Vac (2 connecteurs Luer femelles)	10/caisse
M7098	Jet-Vac Tubulure de drainage grand calibre	5/boîte
M7099	Jet-Vac Tubulure de drainage	10/caisse
M7555	Sac de drainage 2000 cc	10/caisse

ADVANCED
SURGI-PHARM INC.

Scannez le code QR
pour en savoir plus
sur nos produits



Système de Drainage
Pleural et Péritonéal

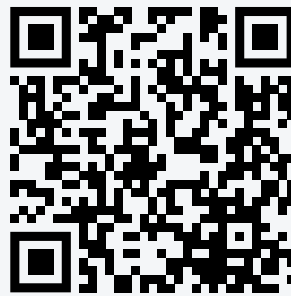

Jet-Vac Bouteilles
de drainage